




Omnifilm[®]

transparent kirurgisk tejp

Fixeringstejp för känslig hud

Tejpen är lätt att riva både på längden och tvären

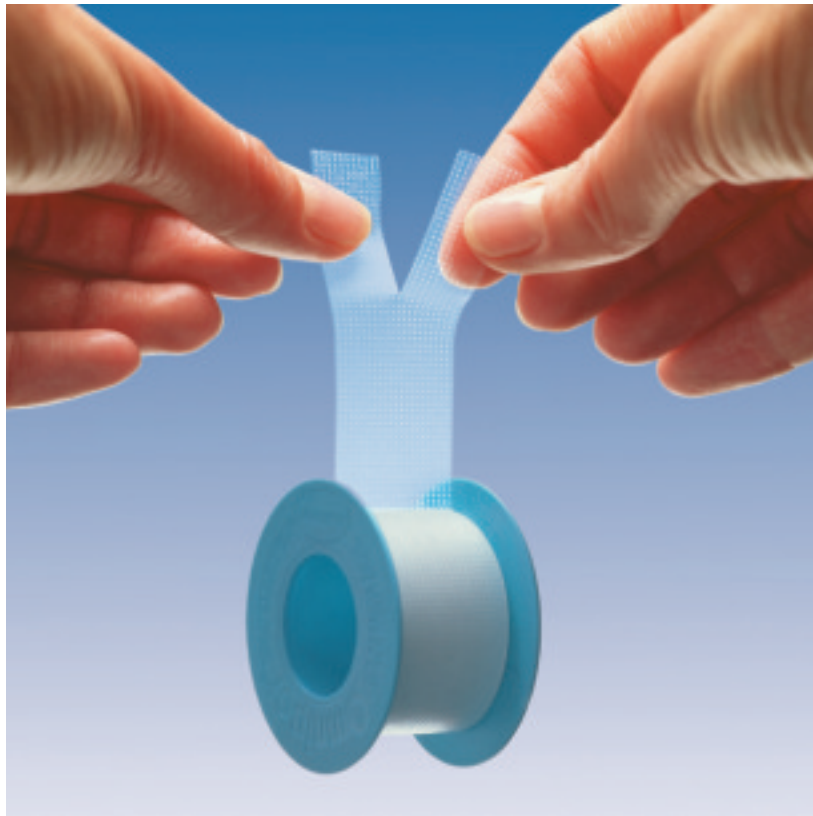

Häftar säkert men kan ändå tas bort smärtfritt





HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 44

Omnifilm®

Omnifilm är en hypoallergen, transparent, porös, elastisk plast-tejp för fixering.

Egenskaper

Den porösa tejpens är genomsläpplig för luft och fukt vilket ger den utmärkta hudvänliga egenskaper.

Omnifilm häftar säkert men kan trots detta avlägsnas utan smärta.

Omnifilm är smutsavstötande.

Materialets transparens gör det möjligt att kontrollera vätskeflödet vid fixering av kanyler eller slangar.

Häftan är lätt att riva både på längden och tvären.

Omnifilm absorberar inte röntgenstrålar och behöver därför inte avlägsnas före röntgenundersökningar.

Huden måste vara torr vid fixering av tejpens.

Material

Polyetylen-vinyl-acetat film med en kolofoniumfri acrylathäftmassa.

Spole av polystyren.

Användningsområde

Alla sorters förbandsfixering särskilt där visuallitet krävs ex. vid kanyler, sonder, katetrar. Passar för patienter med känslig hud.



Sortiment	Storlek	Avd.förp. (Afp)	Art.nr	Transp. förp.
<u>På plastpole</u>				
<u>i ask</u>	9,2m x 1,25 cm	5 st	900 585	36 Afp
	9,2m x 2,5 cm	5 st	900 586	20 Afp
	9,2m x 5 cm	5 st	900 587	40 Afp