



Hydrofilm® roll

Transparent sårfilm på rulle

Hydrofilm är ett självhäftande transparent filmförband för enkel förbandsfixering. Hydrofilm ger möjlighet till effektiv sårhäkning samtidigt som den är hudvänlig och enkel att hantera.

Vattentät och ogenomtränglig för bakterier

Transparent



Kan enkelt klippas till nödvändig längd



Indikation

Används som postoperativt och primärt förband för att skydda sår som inte vätskar eller som fixering.

T.ex. kateter- och kanylfixeringar, täckförband över geler och kalciumalginater eller som skydd mot mekanisk irritation.

Kontraindikationer:

Hydrofilm roll ska inte användas på infekterade, blödande eller vätskande sår.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Hydrofilm roll är ett självhäftande, transparent filmförband för enkel förbandsfixering. Filmen består av tunn vattentät polyuretanfilm som skyddar mot yttre kontaminering. Förbandet andas och har en häftmassa som är dermatologiskt testad.


Egenskaper

Tack vare den tunna, transparenta filmen kan såret hållas under uppsikt utan att förbandet behöver bytas. Denna egenskap gör att såret inte behöver störas i onödan under läkningsprocessen. Eftersom Hydrofilm roll stänger ute både vatten och bakterier minimeras risken för sekundärinfektioner. Det fungerar också utmärkt att bära förbandet vid bad och dusch. Häftmassan i filmförbandet har kraftig häftförmåga för att förbandet ska kunna sitta stadigt under längre tid, men kan ändå tas bort utan att lämna några klisterrester.

Material

Semipermeabel polyuretanfilm med hypoallergen häftmassa av akrylat. Kolofoniumfri.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

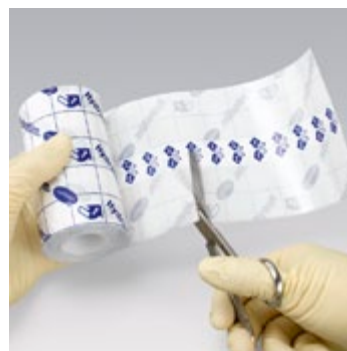

Klipp för önskad längd.

Sortiment	Storlek	Art.nr.	Afp	Tfp
Hydrofilm.roll	5 cm x 10 m	685 790	1 st	24 Afp
Osteril, enstycksförpackad	10 cm x 2 m	685 791	1 st	24 Afp
	10 cm x 10 m	685 792	1 st	32 Afp
	15 cm x 10 m	685 793	1 st	20 Afp

Fördelar:

Säkert sårskydd

Enkel hantering

Kolofoniumfri

Dermatologiskt testad

Transparent