




Omnifilm[®]

Transparent kirurgisk tejp

Omnifilm ger en säker fixering med möjlighet att se vätskeflödet i exempelvis sonder. Enkel att riva av både på längden och tvären.

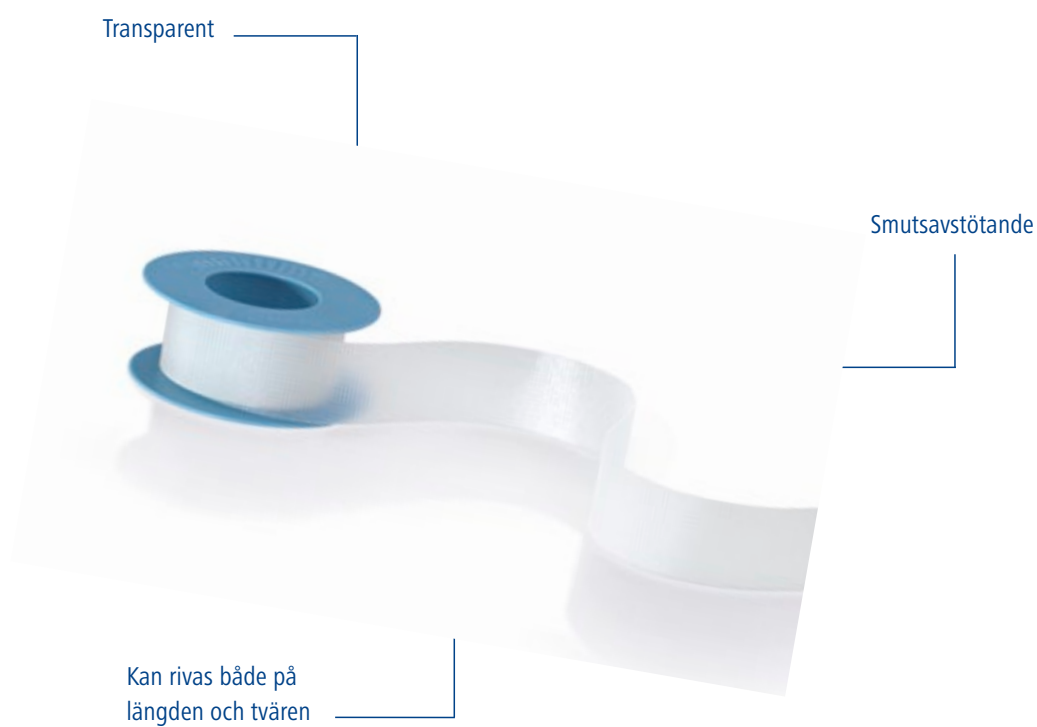

Indikation

För fixering där visualitet krävs t.ex. vid kanyler, sonder och katetrar. Passar för patienter med känslig hud.

Kontraindikationer:

Inga kända.





helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Omnifilm är en transparent, porös och elastisk plasttejp för fixering av förband, slangar och dylikt.

Egenskaper

Den porösa tejp är genomsläpplig för luft och fukt vilket innebär att Omnifilm är mycket hudvänlig.

Tejpen fäster säkert men kan ändå avlägsnas utan smärta och lämnar heller inga klisterrester kvar på huden.

Omnifilm absorberar inte röntgenstrålar och behöver därför inte avlägsnas före röntgenundersökningar.

Omnifilm är smutsavstötande, och temperaturbeständig.

Tejpen går lätt att riva av både på längden och tvären.

Materialets transparens gör det möjligt att kontrollera vätskeflödet vid fixering av kanyler och slangar.

Material

Polyvinylacetatfilm med hypoallergen häftmassa baserad på akryl, fri från kolofonium och latex. Spole av polystyren.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Fixeringsinstruktioner

Huden måste vara torr vid fixering av tejp.



Omnifilm har häftmassan applicerad i strängar.

Fördelar:

Säker fixering

Enkel hantering

Lämnar inga klisterrester

Transparent

Behöver inte avlägsnas vid röntgen

Fri från kolofonium och latex

Sortiment	Storlek	Art.nr.	Afp	Tfp
Omnifilm.	9,2 m x 1,25 cm	900 585	5 st	36 Afp
På plastspole i ask	9,2 m x 2,5 cm	900 586	5 st	20 Afp
	9,2 m x 5 cm	900 587	2 st	40 Afp